



## “拉维邦”牌 水质比色检验器 “LOVIBOND” Water Colorimetric Testers

德国制造  
Made in Germany

### MD200 Photometer Test Kit 数显比色计套装

- 适合测试环境水质, 泳池水质, 如氯含量, 酸碱度等等
- 携带型光度计, 防水设计, 轻巧易用
- 背光数字式显示
- 标准配置: 光度计, 试剂药片, 有盖比色瓶, 塑胶搅拌棒, 试管刷, 携带箱及说明书等

校正標準  
(另購)



订货编号	Measuring Range 测试范围	
<b>2860102</b> (3 in 1)	氯 Chlorine: 0.01 – 6.0mg/l, 酸碱度 pH: 6.5 – 8.4mg/l, 氰尿酸 Cyanuric Acid: 0 – 160mg/l	
<b>2861902</b> (6 in 1)	氯 Chlorine: 0.01 – 6.0mg/l 酸碱度 pH: 6.5 – 8.4mg/l 氰尿酸 Cyanuric Acid: 0 – 160mg/l	总碱度 Alkalinity-m (total): 5 – 200mg/l 水硬度 Calcium Hardness: 0 – 500mg/l 溴 Bromine: 0.05 – 13mg/l

### MD600 Multi-parameter Photometer 多功能(参数)数显比色计

- 适合各种水质测试, 包括食水, 污水, 海水, 科学化验等
- 一机多用, 内置 120 多种不同测试方法(参数), 如 Chlorine, pH, COD, Hardness, Iron, Manganese, Nitrite, Ozone, Phosphate 等
- 采用 LED 光源, 稳定耐用
- 可储存 1000 个数据及 10 个自定的测试方法
- 数字式显示, 防水设计
- 标准配置: 光度计, 有盖比色瓶, 携带箱及说明书等



订货编号: **214020**

### MultiDirect Multi-parameter Photometer 多功能(参数) 数显比色计

- 适合各种水质测试, 包括食水, 污水, 海水, 科学化验等
- 一机多用, 内置多种不同测试方法(参数)
- 采用 LED 光源, 稳定耐用
- DUAL BEAM 及 Interface Filter 光学技术, 读数准确
- 可储存 1000 个数据
- 数字式显示, 防水设计
- 设有 RS232 可连接电脑及打印机
- 标准配置: 光度计, 有盖比色瓶, 携带箱及说明书等



订货编号: **210000**

### COD Photometer Kit 数显 COD 比色计套装



MD100 COD



MD200 COD

- 用作测试水的 COD (Chemical Oxygen Demand)
- 符合 ISO 15705:2003-01 标准
- 背光数字式显示
- 操作简易
- 3 个量程: 0-150 mg/l, 0-1500 mg/l, 0-15000 mg/l
- 需使用 COD VARIO tube test 试剂, 方便可靠
- 连 RD125(24 孔)加热器
- 另可选购标准溶剂作校准用途

订货编号	配置
<b>276130</b>	MD100 光度计、RD125 加热器、LR 及 MR 试剂各 25 支, 携带箱及说明书等
<b>2892602</b>	MD200 光度计、RD125 加热器、LR 及 MR 试剂各 25 支, 携带箱及说明书等

订货编号	试剂及加热器
<b>2420720</b>	LR 试剂 0-150mg/l (25pc)
<b>2420725</b>	LR 试剂 0-150mg/l (150pc)
<b>2420721</b>	MR 试剂 0-1,500mg/l (25pc)
<b>2420726</b>	MR 试剂 0-1,500mg/l (150pc)
<b>2420722</b>	HR 试剂 0-15,000mg/l (25pc)
<b>2420727</b>	HR 试剂 0-15,000mg/l (150pc)



## “拉维邦”牌 水质比色检验器 “LOVIBOND” Water Colorimetric Testers

德国制造  
Made in Germany

### AF116B Pool Water Comparator Test Kit 泳池检验器套装(比色器)—氯及酸碱

- 适合学校及大型私人游泳池用
- 标准配置: 比色器 2000, 氯色盘 3/40B, 酚红色盘 2/1J, 方型试管, 试剂药片, 塑胶搅棒, 试管刷, 携带箱及说明书
- 氯 Chlorine: 0.2 – 4.0mg/l
- 酸碱度 pH: 6.8 – 8.4mg/l

订货编号: **411160**



### TB250 WL Turbidity Meter 红外线数显浊度计 (EPA Standard 180.1)

- 适合测试水的浊度
- 附合美国 EPA 浊度测试标准
- (EPA Standard 180.1)
- 防水设计, 操作简易, 携带方便
- 标准配置: 浊度计, 浊度标准液, 有盖比色瓶, 携带箱及说明书
- 测试范围: 0.01 – 1100NTU

订货编号: **194200**



### 比色器 Comparator 2000

运用目视比色原理进行水质检验, 结果准确可靠, 携带方便, 坚固耐用而且操作方法简易, 使用时插入色盘, 将水样品倒入试管中, 加入试剂(通常使用药片), 等完全呈现颜色后, 转动色盘用肉眼观察至颜色一致时, 读取色盘上的浓度资料。(试管, 色盘及试剂另购)

订货编号: **0142000**



### 泳池检验器 Pool Tester

简便廉宜的泳池水检验器, 适合家庭及私人游泳池, 采用坚巧的塑胶盒构造, 使用剂量准确的箔封药片, 具自动颜色补偿, 全套含 20 粒 DPD 1 号及 20 粒酚红药片。

- 氯 Chlorine: 0.1 – 3.0mg/l
- 酸碱度 pH: 6.8 – 8.2

订货编号: **151600**




### 比色盘 Colour Discs

有 400 种以上的比色盘可供选购作比色分析之用, 采用永不褪色的玻璃制成标准颜色镜片保证永远准确。

常用的有:

- 3/40A (货号: **0234010**)  
氯 Chlorine: 0.1 – 1.0 mg/l
- 3/40B (货号: **0234020**)  
氯 Chlorine: 0.2 – 4.0 mg/l
- 2/1J (货号: **0221130**)  
酸碱度 pH: 6.8 – 8.4

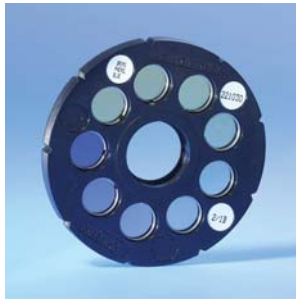

### 试剂药片及药粉 Reagent Tablets / Powder



试剂药片



试剂药粉

箔封式药片及药粉, 使用简便, 剂量准确, 安全可靠, 携带及储存方便

### 冷冻培养箱 BOD Cooled Incubator

- 适合 BOD 测试, 储存水样本, 细菌培养等
- 数字式温度设定及显示
- 温控范围: +2 - +40°C
- 温度准确度: +/- 1°C



可另选玻璃门型号



型号	容量/尺寸(W x D x H)
<b>TC135S</b>	135L / 60 x 60 x 85 cm
<b>TC175S</b>	175L / 60 x 61 x 125 cm
<b>TC255S</b>	255L / 60 x 61 x 164 cm
<b>TC445S</b>	445L / 75 x 73 x 164cm

货号	名称及用途	包装
<b>511052BT</b>	DPD1 药片-试验游离氯在水中含量(余氯)	500/PK
<b>511082BT</b>	DPD3 药片-试验水中的有机氯化物	500/PK
<b>511222BT</b>	DPD4 药片-试验水中氯的总含量(全氯)	500/PK
<b>511752BT</b>	Phenol Red 药片-试验水的 pH 值	500/PK
<b>511772BT</b>	Phenol Red (Photometer)药片-试验水的 pH 值(数显比色计使用)	500/PK
<b>530100</b>	VARIO Chlorine FREE-DPD 药粉-试验游离氯	100/PK
<b>530120</b>	VARIO Chlorine TOTAL-DPD 药粉-试验全氯	100/PK

尚有其他不同试剂, 请联络我们查询有关资料



## “拉维邦”牌 色辉计 “LOVIBOND” Tintometers

英国制造  
Made in England

### PFXi995, PFXi950, PFXi880, PFXi195 系列电子色辉计

数显电子色辉计, 自动比较样品颜色, 不需花时间去用标准片与样品作颜色对比, 简单快捷。随机附送软件, 与电脑连接, 方便数据处理。亦附送 RCMSi 套装, 可远程作仪表校正。

PFX995i, PFX950i, PFX880i 系列可配备样品保温装置(另购配件, 请在购买时注明, 最高 95C)。

购买时, 请依据所要求测试的颜色标准(多达三十多种), 然后选择适当型号。

用家亦可加配色标, 详细请联络我司。



系列	PFXi995 / PFXi950 / PFXi880	PFXi195
比色系统	16 滤光片	9 滤光片
可容最长比色皿	6"(153mm)	50mm
样品保温	另购配件	没有
软件	有	

通用型号	标配色标
PFXi195/1	Pt-Co/Hazen/APHA Colour, Gardner Colour, Iodine Colour, CIE Values, spectral data
PFXi195/2	Saybolt, ASTM Colour (ASTM D1500), Pt-Co/Hazen/APHA colour, CIE Values, Spectral data
PFXi195/5	European Pharmacopoeia (includes automatic selection of colour series), US Pharmacopoeia, Pt-Co/Hazen/APHA, CIE Values, Spectral data
PFXi880/F	Lovibond RYBN
PFXi880/L	Lovibond RYBN, CIE value, spectral data
PFXi880/AT	AOCS-Tintometer Colour, CIE value, spectral data
PFXi995	Lovibond RYBN, AOCS-Tintometer Colour, Gardner Colour, Pt-Co/Hazen/APHA Colour, FAC colour, Chlorophyll A & B, beta Carotene, Iodine Colour, Hess-Ives Colour Units, Klett (blue filter KS-42) Colour, Kreis Value, CIE Values, Spectral Data
PFXi995/P	Saybolt Colour, ASTM Colour, Pt-Co/Hazen/APHA Colour, Gardner Colour, Lovibond RYBN, IP Units, CIE Values, Spectral Data

### Model F Tintometer 色辉计

多用途的目视比色计, 以拉维邦 (Lovibond) 单位来测量液体 (加购附件亦可测量固体, 粉体及糊体) 的颜色, 含有全套永不褪色的有色玻璃标准片 (红 0.1 至 70, 黄 0.1 至 70, 蓝 0.1 至 40, 灰 0.1 至 3.0), 操作者用肉眼检视观测管时, 圆的一半是光源透过经混合的标准色片所呈现的颜色, 另一半是光源透过样品或从样品反射的颜色, 用手推移标准色片令两个半圆的颜色一致时, 读取标准色片的颜色数据。

国际标准化组织指定 F 型色辉计为各种产品的法定颜色测量方法。

货号	应用范围
180000	用于脂肪, 脂肪油, 漂白虫胶, 化学液体和药剂等。
180270	BS684 型, 适用于动物性和植物性的脂肪和油类。 根据 BS684, 1.14 节及 AOCS 方法 Cc13e-92 之标准测量。



### Comparator 3000 系列 比色计

Comparator 3000 是三分格式目视比色计, 可同时比较两个连续标准色片的颜色与样品的颜色差别, 这设计的好处是, 当样品的颜色与两种标准色片的颜色相近时, 两分格式目视比色计需不停转换标准色片作比较, 但 Comparator 3000 的三分格式设计则可同时进行, 减少转换标准色片次数, 从而更快更准确地得到颜色数据。

货号	型号	颜色标准	应用范围
345030	AF650	ASTM D 1500	用于润滑油, 加熟油, 燃油等石油产品
345010	AF228	Gardner Color (ASTM D 1544)	用于化学品, 树脂, 光油, 脂肪酸, 食用油例如葵花油等
345020	AF229	FAC Color	符合 AOCS Cc13a, 用于脂肪, 脂肪油
345000	AF607	EBC	欧洲啤酒颜色标准, 用于啤酒颜色检定



香港科学仪器社有限公司  
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.  
Tel: (852) 2481 1323  
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)  
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)  
Tel: (86 575) 8812 0560  
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)  
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)  
Tel: (86 20) 8130 7388  
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司  
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.  
Tel: (86 21) 6248 6170  
Fax: (86 21) 6248 0647